



Installation du fauteuil roulant VW

Le fauteuil roulant est
installée à l'arrière du
véhicule



Spitex-Mobile

Bahnhofstrasse 17 - 19

9326 Horn

Tel. 071 846 88 60

www.spitex-mobile.ch



**Place dans la voiture pour un fauteuil
roulant + 5 à 6 personnes**



1



Selon le modèle de la rampe.
Rampe avant dépliage, comme
indiqué sur l'image 2, les deux
côtés à gauche et à droite sont
libérés.

2



Relâchez la rampe des deux côtés.

3



Une poignée pour rabattre la
rampe est située sur le côté de
la rampe.

Pour installer le fauteuil roulant
à l'arrière du véhicule, la rangée
arrière des sièges doit être retirée.



Attachez les quatre rétracteurs de la boîte grise (si elle n'est pas encore installée) aux endroits désignés sur le plancher du véhicule.

4




Assurez-vous que le mamelon de sécurité est sur le côté droit ou gauche.

5



Accrochez le rétracteur en place comme un rail au point le plus bas.

6

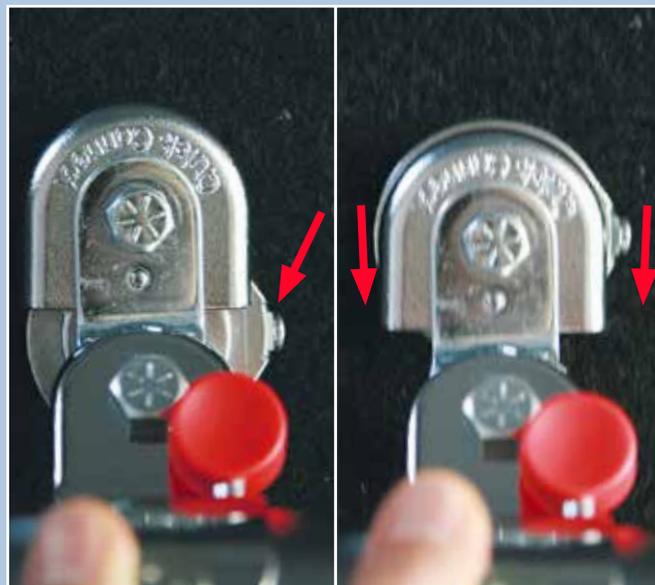



7



Tournez le support de manière à ce que le rétracteur soit fixé par le mamelon.

8



Placez le fauteuil roulant dans le véhicule à l'endroit désiré.

9



Retirez les deux sangles avant du rétracteur et fixez-les aux cadres **FIXE** et **SÛRE** du fauteuil roulant, et non aux roues!

10



Les sangles serrées peuvent être relâchées en appuyant sur le bouton rouge du rétracteur. Ils sont habillés avec le noir, poignée latérale.



Serrez les freins du fauteuil roulant. (Cela peut aussi être fait plus tard.)



Retirez les deux sangles arrière du rétracteur et fixez-les au cadre FIXE du fauteuil roulant, et non aux roues!



Attention:

Attachez les sangles arrière en ligne droite aux rétracteurs de sorte que lorsque vous tirez brusquement, tirez seulement sur le cadre du fauteuil roulant.

Si ce n'est pas possible, vous pouvez également utiliser les rétracteurs encadrés jaunes.





14



Dans la boîte grise, vous trouverez cette contrepartie des sangles.

15



Cliquez sur ces sangles sur l'arrière droit du rétracteur.

16



Pour attacher la personne, utilisez les sangles supplémentaires à l'arrière du véhicule.

17



Connectez les sangles ensemble
Repliez la rampe et vous voilà parti.





Installation du fauteuil roulant VW

Le fauteuil roulant est
installée au milieu du
véhicule



Spitex-Mobile

Bahnhofstrasse 17 - 19

9326 Horn

Tel. 071 846 88 60

www.spitex-mobile.ch



**Place dans la voiture pour un fauteuil
roulant + 3 à 4 personnes**

**Une personne peut s'asseoir à côté du
fauteuil roulant pendant la conduite.**



1



Selon le modèle de la rampe.

Rampe avant dépliage, comme le montre les figures 2, gauches et droites sont libérés.

2



Relâchez la rampe des deux côtés.

3



Une poignée pour rabattre la rampe est située sur le côté de la rampe.



Pour installer le fauteuil roulant dans la partie médiane du véhicule, la rangée de sièges arrière et le double siège de la rangée centrale de sièges doivent être retirés du véhicule.



4

Inclinez le dossier vers l'avant en tirant sur cette boucle.



5

Pour libérer l'ancrage au sol, inclinez la rangée de sièges vers l'avant en tirant sur les boucles inférieures des deux côtés en même temps.
Pour sortir complètement le siège de l'ancrage, il est nécessaire de tirer à nouveau les deux boucles en position repliée vers l'avant.



6

Maintenant, la rangée de deux sièges peut être enlevée.
À ce stade, attachez le fauteuil roulant.



7




8



Placez le fauteuil roulant en place et serrez les freins du fauteuil roulant. (Cela peut aussi être fait plus tard.)

9

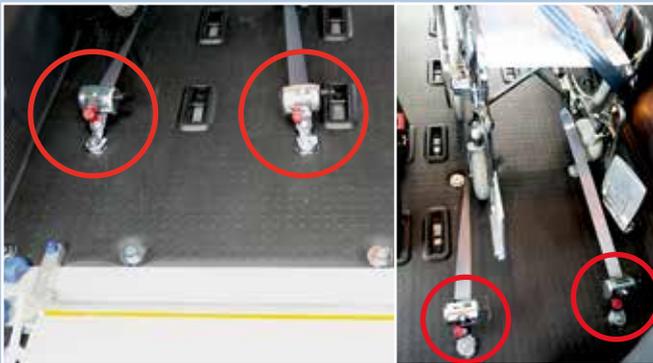

Maintenant, fixez les rétracteurs, que vous trouverez dans la boîte grise, dans les endroits désignés.

Ne pas oublier de verrouiller les freins du fauteuil roulant à l'avance.

10



Retirez les deux sangles avant du rétracteur et fixez-les aux cadres FIXE et SÛRE du fauteuil roulant, et non aux roues!

11



Assurez-vous que le mamelon de sécurité est sur le côté droit ou gauche.

Accrochez le rétracteur en place comme un rail au point le plus bas.



Tournez le support de manière à ce que le rétracteur soit fixé par le mamelon.



Attachez les sangles en ligne droite aux rétracteurs de sorte que, en cas de traction brusque, tirez seulement sur le cadre solide du fauteuil roulant.



Les sangles serrées peuvent être relâchées en appuyant sur le bouton rouge du rétracteur. Ils sont habillés avec le noir, poignée latérale.





15



Dans la boîte grise, vous trouverez cette contrepartie des sangles.

16



Cliquez sur ces sangles sur l'arrière droit du rétracteur.

17



Les sangles peuvent facilement être enclenchées dans le rétracteur.

18



Les sangles existantes peuvent maintenant être insérées dans la contrepartie de la boîte grise.

